

## ویژگی ها :

### استحکام

چسبندگی بافت و استحکام منسجم برای مقاومت در برابر فشارهای بحرانی.

### زیست سازگاری

یک هیدروژل زیست سازگار است ( پلی اتیلن گلیکول).

### قابلیت دید


رنگ آبی متمایز تصویری از ضخامت و پوشش آن را فراهم می کند.

### سرعت

در کمتر از دو دقیقه آماده می شود. هنگام استفاده، در عرض چند ثانیه یک مهر و موم ضد آب را فراهم می کند.


### راحتی

تمام قسمت ها در یک بسته قرار دارد و قابل نگه داری در دمای اتاق می باشد.

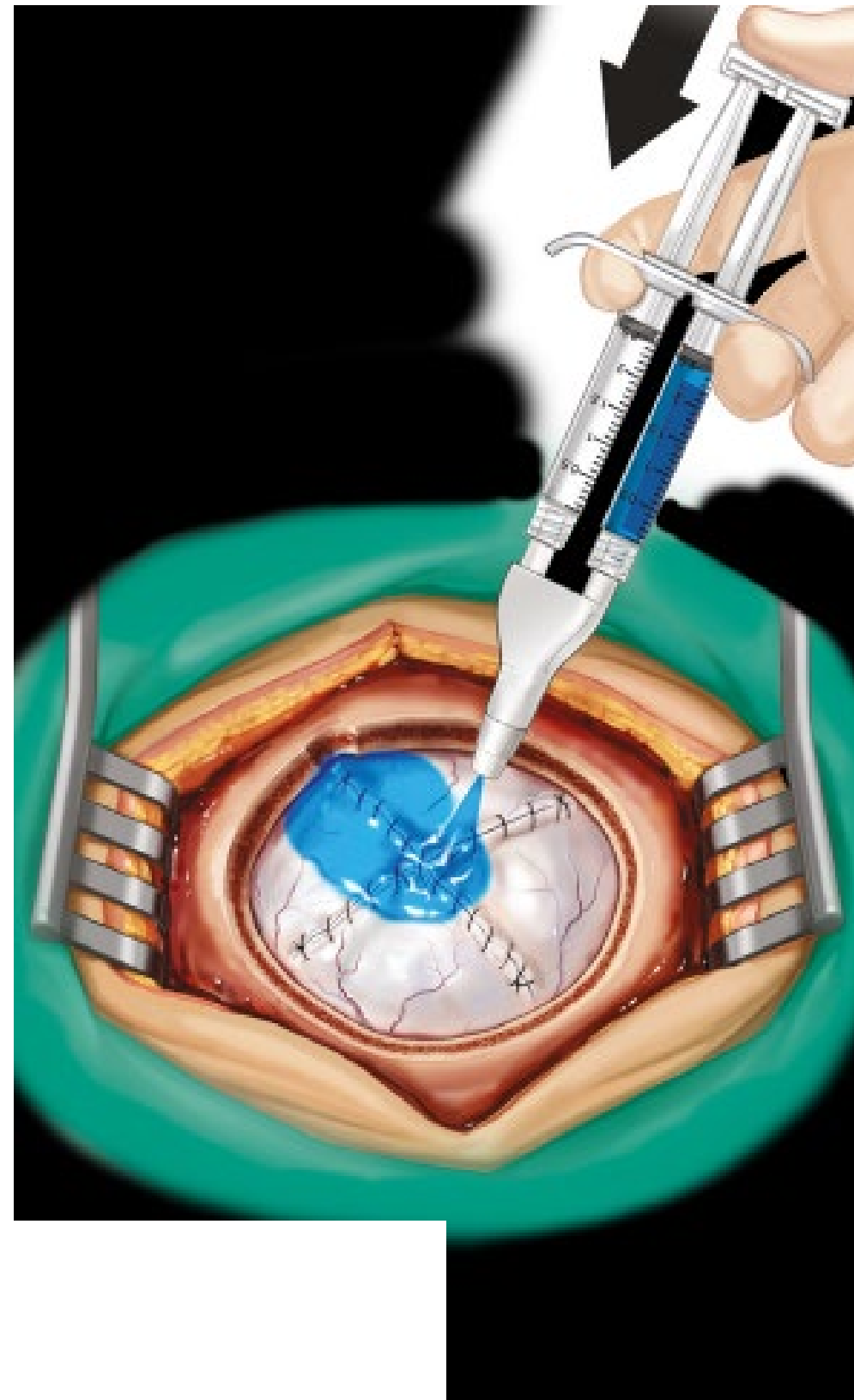

## دوراسیل : سیستمی برای جلوگیری از نشتی دورا

حین عمل های مغز و اعصاب، جلوگیری از نشتی CSF (مایع مغزی نخاعی) به منظور کاهش حوادث نامطلوب بالقوه و اطمینان از نتایج مثبت برای بیمار، ضروری می باشد. دوراسیل، هیدروژلی است که از تکنولوژی خاصی از پلیمر ساخته شده است و یک مهر و موم ضد آب سریع و موثر را حین عمل و در طول دوره بحرانی بهبودی فراهم می کند.

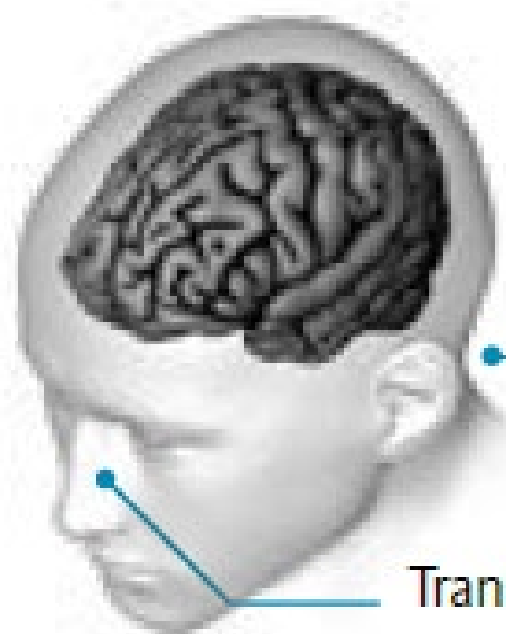

Skull base

Transsphenoidal

**DuraSeal**  
Cranial Sealant System

**دوراسیل Xact :** سیستمی برای جلوگیری از نشتی CSF برای دورا در ناحیه ستون فقرات می باشد. در ناحیه ستون فقرات، حین عمل های ستون فقرات، جلوگیری از نشتی CSF (مایع مغزی نخاعی) به منظور کاهش حوادث نامطلوب بالقوه و اطمینان از نتایج مثبت برای بیمار، ضروری می باشد. دوراسیل Xact جراحان را قادر می سازد تا با استفاده از این تکنولوژی پلیمری ، یک مهر و موم سریع و ضد آب را حین عمل و در طول دوره بحرانی بهبود، فراهم کنند.



**استحکام**  
چسبندگی بافت و استحکام منسجم برای مقاومت در برابر فشارهای بحرانی.

**زیست سازگاری**  
یک هیدروژل زیست سازگار است ( پلی اتیلن گلیکول).

**قابلیت دید**  
رنگ آبی متمایز تصویری از ضخامت و پوشش آن را فراهم می کند.

**سرعت**  
در کمتر از دو دقیقه آماده می شود. هنگام استفاده، در عرض چند ثانیه یک مهر و موم ضد آب را فراهم می کند.

**ویژگی برجسته**  
فرمول بندی تورم کمینه در این محصول موجب تشکیل لایه ای تازک از چسب شده و نگرانی از فضای محدود بین بافت ها را در نواحی مورد نظر از بین می برد و از چسبندگی بین آن ها جلوگیری می کند.

(کاملاً سینتتیک بوده و قابل جذب در ۹ الی ۱۲ هفته طی یک بهبودی طبیعی می باشد)

**راحتی**  
تمام قسمت ها در یک بسته قرار دارد و قابل نگه داری در دمای اتاق می باشد.



## اپلیکاتور MicroMyst

اپلیکاتور قابل انعطاف به همراه پمپ هوای میکرومیست، میزان دقیقی از چسب را از طریق یک اسپری مه پاش مناسب ( با طول ۱۴ سانتیمتر ) پخش می کند. این اپلیکاتور از یک رگولاتور جریان برای کنترل عملکرد پخش یکنواخت هر دو ویال چسب استفاده می کند.

## اپلیکاتور اکستندد تیپ

اپلیکاتورهای اکستندد تیپ این امکان را به کاربران دوراسیل می دهد تا از یک اپلیکاتور قابل انعطاف، قابل تنظیم دستی و با دسترسی و دید بیشتر هنگام استفاده بهره مند گردند. این اپلیکاتورها دارای طول های ۸ و ۱۵ سانتیمتر می باشند

اپلیکاتور ۸ سانتیمتری با قابلیت انعطاف ۶۰ درجه در شفت

